



aquilo | CCT1500

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Διαβάστε προσεκτικά πριν από κάθε χρήση της συσκευής.

Η χρήση της συσκευής Aquilo CCT1500 γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού ή φυσικοθεραπευτή.

- Ο παρών οδηγός περιγράφει μόνο τη λειτουργία της συσκευής. Δεν αποτελεί ιατρική συμβουλή και δεν υποκαθιστά την ιατρική εξέταση.
- Η πίεση, η διάρκεια και η συχνότητα των συνεδριών καθορίζονται αποκλειστικά από τον θεράποντα ιατρό ή φυσικοθεραπευτή.
- Διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με τον ιατρό σας σε περίπτωση πόνου, μωδιασματος, μυρμηκιάσης, αλλαγής χρώματος του δέρματος ή οποιασδήποτε ενόχλησης.
- Η novalite δεν φέρει ευθύνη για χρήση της συσκευής χωρίς ιατρική καθοδήγηση ή αντίθετα με τις οδηγίες χρήσης.

Μονάδα Ελέγχου CCT 1500

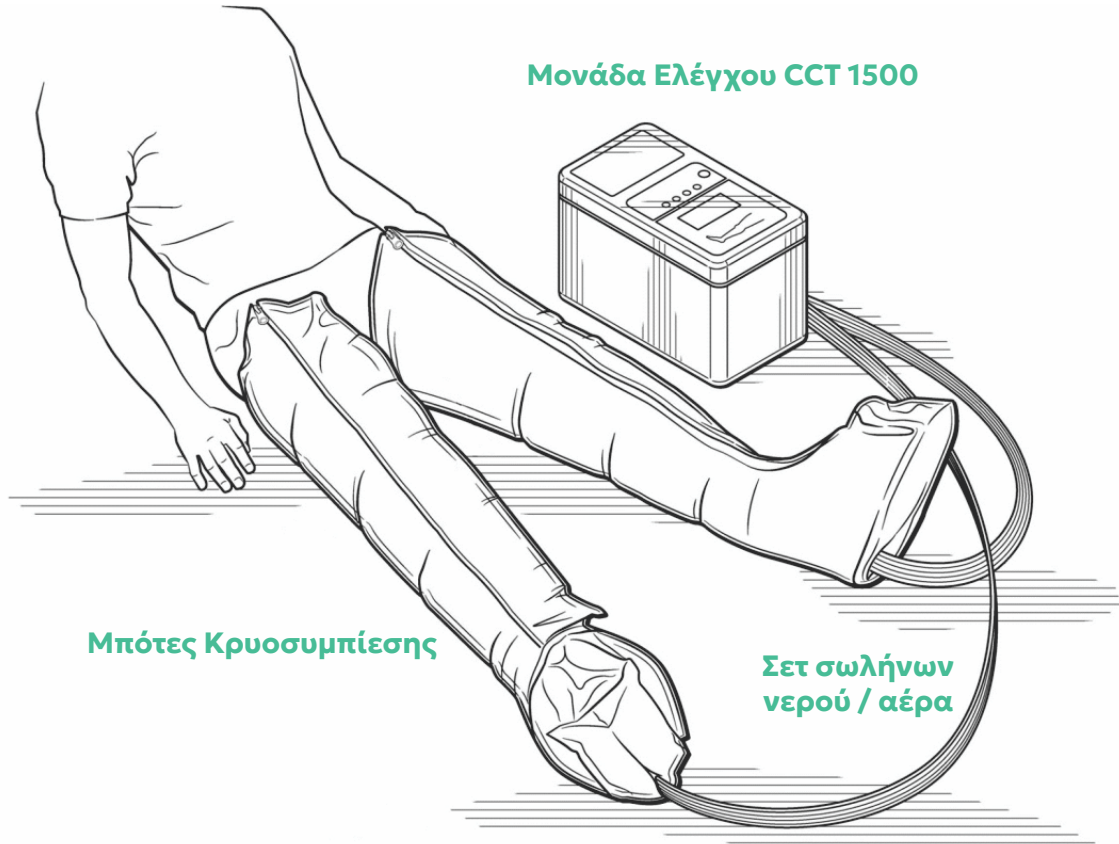

Μπότες Κρυσυμπίεσης

Σετ σωλήνων
νερού / αέρα

1

Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό και πάγο μέχρι τη γραμμή ένδειξης για 1 ή 2 χρήστες.

2

Συνδέστε τους σωλήνες αέρα (air tubing) από τη μονάδα ελέγχου Aquilo (control unit) στις αντίστοιχες υποδοχές αέρα των μποτών (boots).

3

Συνδέστε τους σωλήνες νερού (water tubing) από τη μονάδα ελέγχου Aquilo (control unit) στις αντίστοιχες υποδοχές νερού των μποτών (boots).

4

Φορέστε τις μπότες (boots) και κλείστε τα φερμουάρ μέχρι επάνω.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

1. Πατήστε το πλήκτρο Power στη δεξιά γωνία (μεταλλικό πλήκτρο), για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

2. Ενεργοποιήστε την αντλία νερού (water pump) κρατώντας πατημένο το πλήκτρο στο αριστερό άκρο για 3 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, πατήστε το ξανά για να ξεκινήσει.

3. Ρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη (timer) πατώντας + ή - για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον χρόνο (ο προεπιλεγμένος χρόνος είναι 25 λεπτά).

Με το πλήκτρο Pulse, η αντλία νερού λειτουργεί για 2 λεπτά και σταματά για 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, ο κύκλος επαναλαμβάνεται.



ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

1. Πατήστε Play για να ξεκινήσετε με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πίεσης (75 mmHg για 30 λεπτά).



ΑΛΛΑΓΗ MODE

1. Πατήστε το πλήκτρο SET επάνω αριστερά και στη συνέχεια το πλήκτρο + ή - επάνω δεξιά. Ένα κόκκινο βέλος θα εμφανιστεί κάτω από το Mode.

MODE 1

Sequential

Compression - από κάτω προς τα πάνω.

MODE 2

Uniform

Compression - όλοι οι αεροθάλαμοι (channels) γεμίζουν ταυτόχρονα.

MODE 3

Sequential

compression - από πάνω προς τα κάτω.

MODE 4

Sequential

compression - από κάτω προς τα πάνω, με έναν αεροθάλαμο (channel) κάθε φορά και αποσυμπίεση του προηγούμενου.

MODE 5

Sequential

compression - από κάτω προς τα πάνω, με δύο αεροθαλάμους (channels) κάθε φορά.



ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

1. Πατήστε το πλήκτρο OK κάτω από το SET και στη συνέχεια + ή - για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο συμπίεσης. Ένα κόκκινο βέλος θα εμφανιστεί κάτω από την ένδειξη mmHg.

Ελάχιστο επίπεδο συμπίεσης: 20 mmHg
Μέγιστο επίπεδο συμπίεσης: 150 mmHg



ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΟΝΟΥ

1. Πατήστε το πλήκτρο OK κάτω από το SET και στη συνέχεια + ή - για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον χρόνο.

Ελάχιστος χρόνος: 20 λεπτά

Μέγιστος χρόνος: 200 λεπτά

2. Εάν το επιθυμείτε, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Lock για να κλειδώσετε τις ρυθμίσεις και να αποτρέψετε αλλαγές.

3. Πατήστε το πλήκτρο Start / Pause κάτω αριστερά, για να εκκινήσετε την αντλία συμπίεσης (compression pump).



ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΙΕΣΗΣ

Ενδεικτικές τιμές συμπίεσης (mmHg). Η τελική ρύθμιση γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού ή φυσικοθεραπευτή.

20–40
mmHg

Ήπια πίεση

Αρχικά στάδια αποκατάστασης, ευαίσθητες περιοχές, ασθενείς με καρδιολογικό ιστορικό, υπέρταση και φλεβική ευαισθησία.

40–60
mmHg

Μέτρια πίεση

Τυπική θεραπεία: μείωση οιδήματος, μετεγχειρητική αποκατάσταση και μυϊκοί τραυματισμοί.

60–80
mmHg

Υψηλή πίεση

Έντονο οίδημα σε αθλητές ή υγιείς ιστούς.
Προσοχή σε αγγειακά προβλήματα.


80–150
mmHg

Πολύ υψηλή πίεση

⚠ Μόνο με εντολή ιατρού ή φυσικοθεραπευτή.

⚠ Η προεπιλεγμένη ρύθμιση της συσκευής είναι 75 mmHg (υψηλή πίεση). Προσαρμόστε την πριν από την έναρξη, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή
διευκρίνιση σχετικά με τη χρήση
της συσκευής, επικοινωνήστε
με τη novalite.

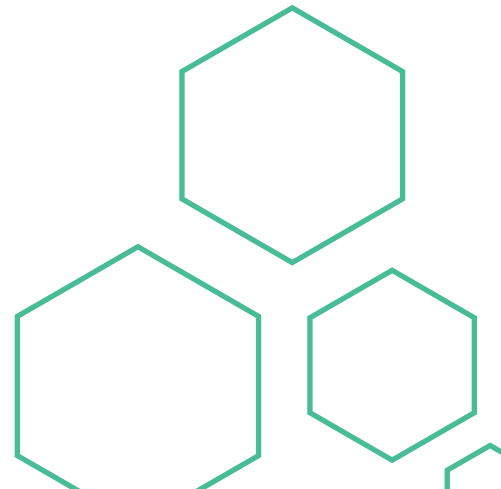



αquilo | CCT1500

Ενοικίαση εξοπλισμού
αποκατάστασης, στο σπίτι σας

Παλαμηδίου 30, Άλιμος Τ.Κ. 17455

Τ: 216 200 2026, Κ: 6940 272 006

info@novalite.gr

novalite.gr

Πριν από κάθε διάθεση, η συσκευή και τα επαναχρησιμοποιούμενα εξαρτήματά της καθαρίζονται και απολυμαίνονται σχολαστικά, με ιδιαίτερη προσοχή στις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τον χρήστη.

Για πληροφορίες σχετικά με την παράδοση, την επιστροφή ή την υποστήριξη του εξοπλισμού, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη novalite.

